


【使用说明】 仅供天弘基金-宋鹏参考

1. 存放物资时请填写好试剂存放清单，方便自己和他人取用物资；

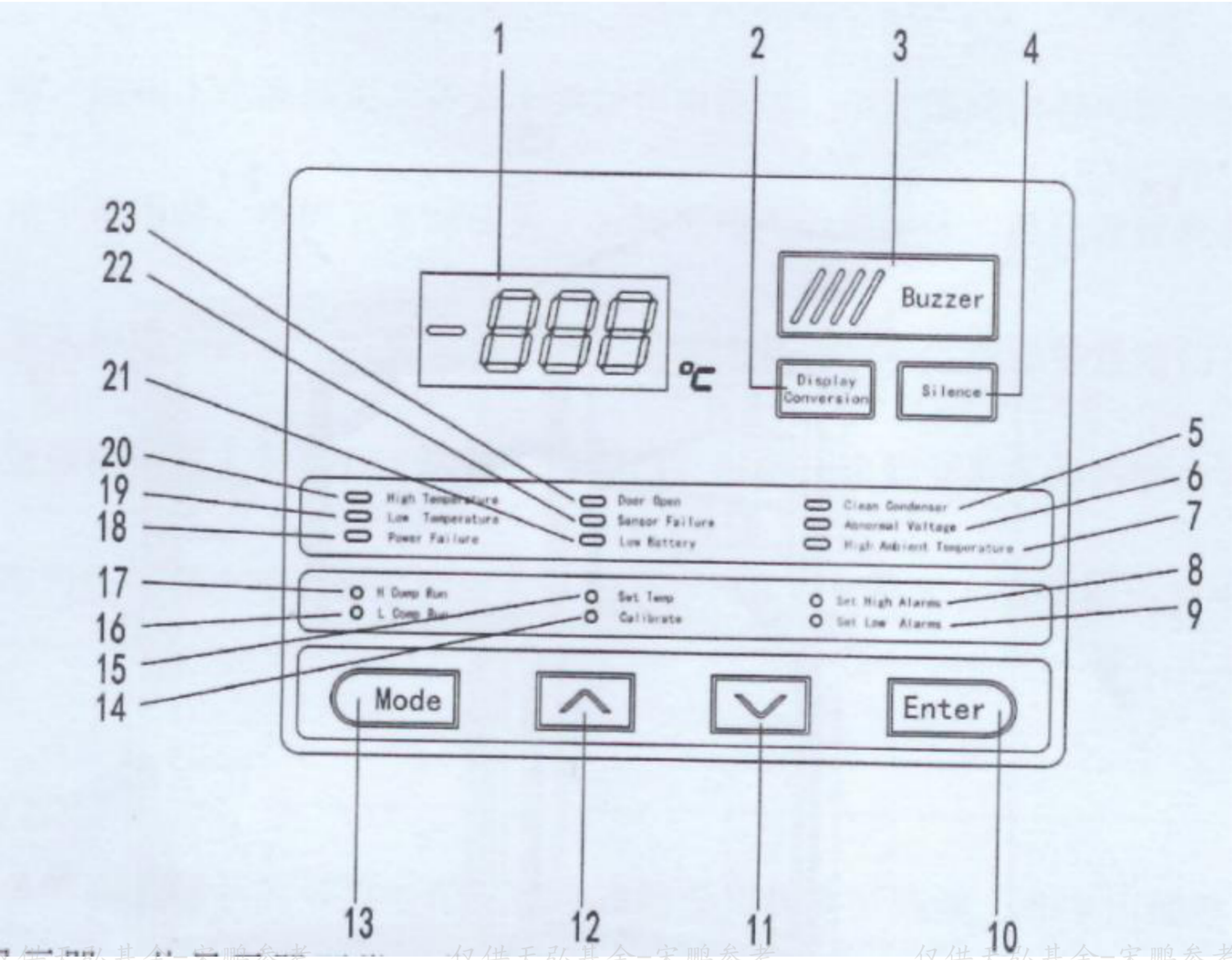

2. 打开冰箱门时，用两只手分别握住左侧的把手的上下部，然后向上用力扳起，之后便可以拉开冰箱门； 仅供天弘基金-宋鹏参考
3. 存取物资时请务必戴好冰箱右侧的防冻伤手套，用后也请放回原位； 仅供天弘基金-宋鹏参考
4. 存取物资后，在关上冰箱门后请务必将左侧把手归位。 仅供天弘基金-宋鹏参考

【控制面板】 仅供天弘基金-宋鹏参考

- 仅供天弘基金-宋鹏参考
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
1. 数字式温度显示器：此显示器正常工作时显示当前箱内温度。 仅供天弘基金-宋鹏参考
2. 显示切换键：正常显示情况下，按此键一秒可显示各探头温度、当前电压，再次按此键可以返回正常显示。参数设定菜单下，按下此键退出设定菜单。 仅供天弘基金-宋鹏参考
3. 蜂鸣器 仅供天弘基金-宋鹏参考
4. 静音键：按下该键，报警声将停止。（按静音键仅是关闭本次异常状态报警的蜂鸣，如故障排除，下次异常时蜂鸣器会继续报警） 仅供天弘基金-宋鹏参考



- 仅供天弘基金-宋鹏参考
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
5. 冷凝器脏堵报警灯：当冷凝器过滤网上有过多的积灰时，此灯亮。此时请清洗过滤网。
6. 电压异常报警灯：当输入电压超过交流220V±10%时此灯亮。
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
7. 环境温度过高报警灯：当环境温度超过30℃时此灯亮，当环境温度超过32℃时此灯亮并伴有蜂鸣报警。
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
8. 高温报警设定指示灯：设定柜内高温报警时，此灯亮。
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
9. 低温报警设定指示灯：设定柜内低温报警时，此灯亮。
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
10. 确定键：在设置参数时，此键起确认和保存的功能。
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
11. 数值减小键(V)：在设置参数时按下该键可使数值减小。
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
12. 数值增加键(Λ)：在设置参数时按下该键可使数值增加。
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
13. 模式键：在设置参数时，此键起切换的功能。
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
14. 探头校准设定指示灯：对各个探头进行温度校准设定时，此灯亮。
15. 箱内温度设定指示灯：对箱内温度设定时，此灯亮。
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
16. 压缩机运行指示灯：压缩机运行时，此灯亮。
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
17. 压缩机运行指示灯：压缩机运行时，此灯亮。
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
18. 断电报警灯：当电源切断时，此灯亮。
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
19. 箱内温度过低报警灯：箱内温度低于报警设定值一定时间时，此灯亮。
20. 箱内温度过高报警灯：箱内温度高于报警设定值一定时间时，此灯亮。
21. 蓄电池电量报警灯：当蓄电池电量过低时，此灯亮。
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
22. 探头故障报警灯：当有探头短路或者断路时，此灯亮。
- 仅供天弘基金-宋鹏参考
23. 门开报警灯：当门打开超过一定时间时，此灯亮。
- 仅供天弘基金-宋鹏参考