


仅供诺德基金-李建国参考

仅供诺德基金-李建国参考
C124 -80℃冰箱使用说明书

仅供诺德基金-李建国参考

【使用说明】 仅供诺德基金-李建国参考

1. 存放物资时请填写好试剂存放清单，方便自己和他人取用物资；

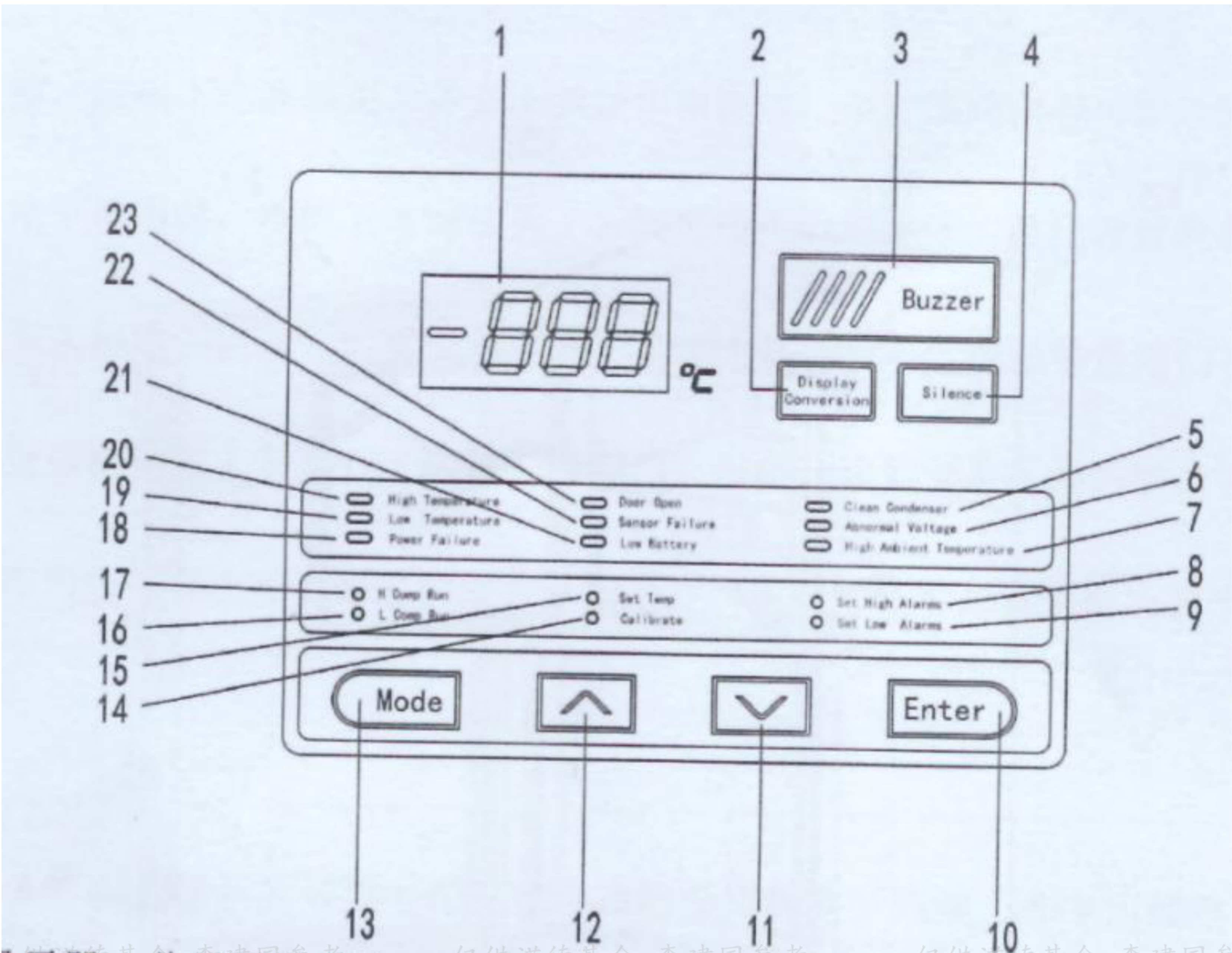

仅供诺德基金-李建国参考

仅供诺德基金-李建国参考

仅供诺德基金-李建国参考

2. 打开冰箱门时，用两只手分别握住左侧的把手的上下部，然后向上用力扳起，之后便可以拉开冰箱门； 仅供诺德基金-李建国参考

3. 存取物资时请务必戴好冰箱右侧的防冻伤手套，用后也请放回原位；

仅供诺德基金-李建国参考

仅供诺德基金-李建国参考

仅供诺德基金-李建国参考

4. 存取物资后，在关上冰箱门后请务必将左侧把手归位。 仅供诺德基金-李建国参考

【控制面板】 仅供诺德基金-李建国参考

仅供诺德基金-李建国参考

仅供诺德基金-李建国参考

仅供诺德基金-李建国参考

1. 数字式温度显示器：此显示器正常工作时显示当前箱内温度。 仅供诺德基金-李建国参考

2. 显示切换键：正常显示情况下，按此键一秒可显示各探头温度、当前电压，再次按此键可以返回正常显示。参数设定菜单下，按下此键退出设定菜单。 仅供诺德基金-李建国参考

仅供诺德基金-李建国参考

仅供诺德基金-李建国参考

仅供诺德基金-李建国参考

3. 蜂鸣器 仅供诺德基金-李建国参考

4. 静音键：按下该键，报警声将停止。（按静音键仅是关闭本次异常状态报警的蜂鸣，如故障排除，下次异常时蜂鸣器会继续报警） 仅供诺德基金-李建国参考

